


香芹酮 (+/-)

Chiral Separation on MEGA-DEX Columns

Column: **MEGA-DEX DAC Beta - 0.25mm, 0.25 μ m, 25m**

Catalog Code: DEX-DAC-B-025-025-25

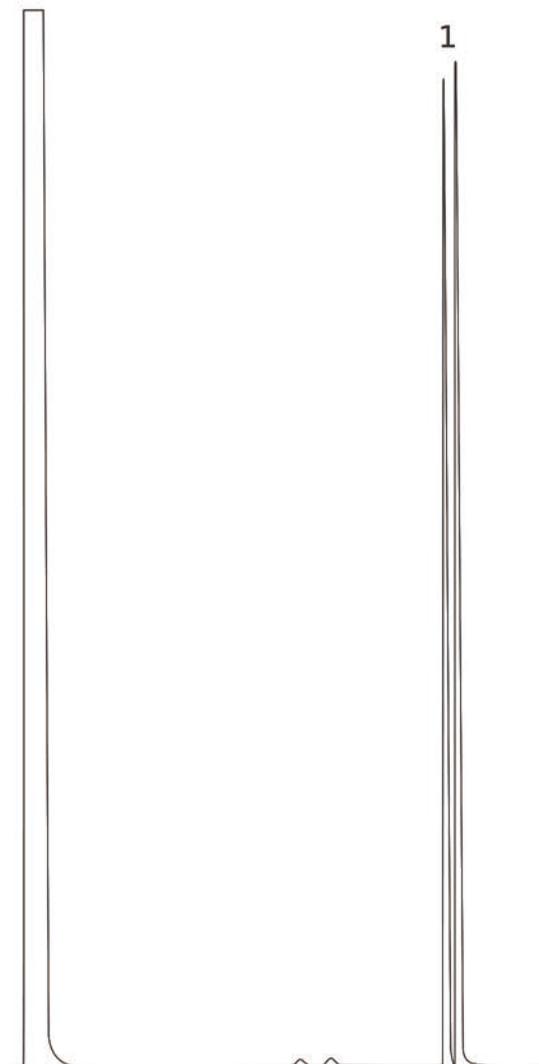

条件:

进样口: 分离250 $^{\circ}$ C, 0.5 μ L进样量, 1:50分流比

检测器: FID 250 $^{\circ}$ C

柱箱程序: 85-160 $^{\circ}$ C, 1.5 $^{\circ}$ C/min

载气: 氢气, 75kPa

制样: 标准混合, 1mg的样品溶解在1mL的正己烷中

峰:

1. 香芹酮 (+/-)